



ANALISADOR DE ESTABILIDADE MULTIAMOSTRAS

TURBISCAN TOWER

O TURBISCAN TOWER é um analisador de estabilidade macroscópica e coloidal de 6 amostras e o principal produto da linha TURBISCAN. Baseado na poderosa tecnologia de SMLS, oferece medição da estabilidade de formulações rápida, precisa e quantitativa (emulsões, suspensões, espumas).

O TURBISCAN TOWER oferece 6 posições independentes de medição permitindo a comparação simultânea de formulações ou proporcionando flexibilidade ao trabalhar em diferentes projetos. Permite uma avaliação rápida e precisa da estabilidade e do envelhecimento de qualquer formulação (altamente concentrada e opaca para sistemas tipo água). Quaisquer alterações que ocorram na dispersão, como sedimentação, floculação, formação de creme e coalescência, serão detectadas e quantificadas imediatamente. Não só economiza tempo graças à extrema sensibilidade da tecnologia de SMLS, mas também permite testes de estabilidade acelerados variando a temperatura (faixa de temperatura mais ampla de 4 a 80 °C) e atende totalmente às recomendações ISO (ISO/TR 13097:2013, ISO/TR 18811:2018). A medição da estabilidade é feita com técnica não invasiva e não destrutiva, preservando a integridade e originalidade das amostras. Os resultados são salvos no software, mas também são exibidos na tela frontal com uma leitura simples da estabilidade graças a um código de cores simples. O TURBISCAN TOWER ajuda a planejar, melhorar e monitorar a qualidade da formulação e dispersão de maneira econômica e confiável. Isso ajuda a tomar decisões rapidamente com base em fatos.



* A imagem mostra o novo design do produto – disponível a partir de abril de 2024

ANALISADOR DE ESTABILIDADE MULTIAMOSTRAS TURBISCAN TOWER


O LÍDER MUNDIAL EM ANÁLISE DE ESTABILIDADE

- | Detecção acelerada de desestabilização – até 1.000 vezes mais rápida que a observação visual graças ao SMLS
- | 6 posições independentes de medição
- | Estabilidade real: análise de estabilidade da amostra sem necessidade de diluição ou estresse mecânico, em concentrações de até 95%
- | Faixa de temperatura de 4 °C a 80 °C para acelerar os tempos de medição e observar a desestabilização sob condições reais de armazenamento
- | Medições quantitativas de estabilidade de dispersão e prazo de validade, velocidade de migração, diâmetro do tamanho das partículas e outros parâmetros
- | Classificação de estabilidade com um clique com o Índice de Estabilidade TURBISCAN
- | O espaço do laboratório é precioso: área ocupada pelo instrumento minimizada
- | Tela LCD frontal com status de medição e resultados de estabilidade


ANALISADOR DE ESTABILIDADE MULTIAMOSTRAS TURBISCAN TOWER

APLICAÇÕES TÍPICAS


Sempre que você estiver trabalhando com suspensões, emulsões, coloides ou espumas, o TURBISCAN é seu companheiro ideal de caracterização. A série TURBISCAN é usada em diversas indústrias, como farmacêutica, cosmética, alimentos e bebidas, tintas e revestimentos, petróleo e gás, baterias, agroquímicos, química e muito mais.

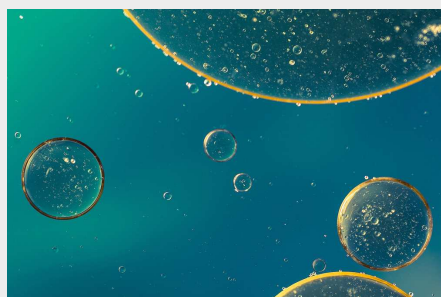

emulsões

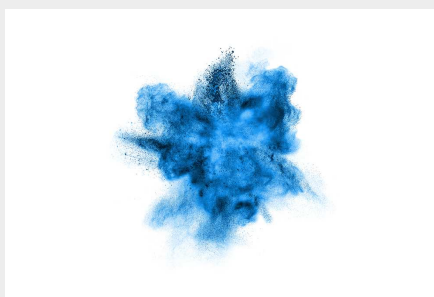

suspensões

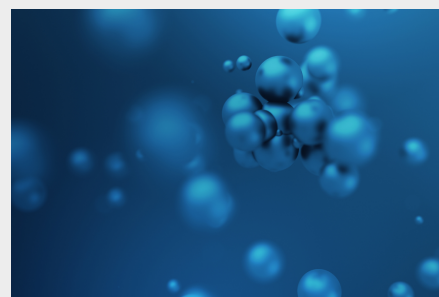

coloides & nanopartículas

- | Loções e cremes cosméticos
- | Produtos e bebidas lácteos, emulsões aromatizantes
- | Formas farmacêuticas parenterais e tópicas
- | Fluidos metalúrgicos
- | Agroquímicos: fertilizantes, pesticidas...
- | Emulsão de petróleo

- | Tintas e revestimentos
- | Suspensão de medicamentos e vacinas
- | Maquiagem e protetor solar
- | Indústria química e de polímeros
- | Cerâmica e catalisadores
- | Pastas de bateria
- | Pastas eletrônicas

- | Sistema de distribuição de medicamentos: Nanopartículas lipídicas (LNPs), lipossomas...
- | Pesquisa sobre nanopartículas e suspensão de nanopartículas
- | Dispersão de polímero e biopolímero
- ... e muito mais!

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

DETECÇÃO RÁPIDA DE PARTÍCULAS DE SEDIMENTAÇÃO

SEDIMENTAÇÃO

A tecnologia TURBISCAN oferece uma detecção de sedimentação significativamente mais rápida (até 1.000 vezes) e mais confiável em comparação com a observação visual. Além disso, a observação a olho nu dificulta o cálculo da taxa de migração e é propensa a erros e interpretações errôneas. Por outro lado, a tecnologia TURBISCAN fornece uma maneira rápida e não destrutiva de detectar e quantificar a sedimentação e o tamanho das partículas ao longo do tempo e pode detectar até mesmo pequenas alterações em amostras altamente concentradas sem qualquer diluição ou estresse mecânico. Isso a torna ideal para analisar suspensões e formulações complexas e obter uma resposta mais rápida, confiável e precisa no monitoramento da sedimentação.



DETECÇÃO RÁPIDA DE MIGRAÇÃO DE GOTÍCULAS

FORMAÇÃO DE CREME DE EMULSÕES

Quando se trata de medir a migração de gotículas e o comportamento de formação de creme em sistemas de emulsão, a tecnologia TURBISCAN apresenta diversas vantagens para os formuladores. Por um lado, fornece uma medição rápida (até 1.000 vezes mais rápida que a observação visual) de

amostras nativas e uma forma não destrutiva de detectar e medir a migração de gotículas. Por outro lado, a taxa de migração pode ser facilmente determinada e ajuda o formulador a comparar formulações, tornando-a ideal para analisar emulsões complexas com uma ampla gama de tamanhos de gotículas e concentrações. Além disso, a tecnologia TURBISCAN fornece informações sobre os mecanismos que impulsionam a migração de gotículas, que podem ser usados para melhorar as condições de formulação e processamento. No geral, o uso da tecnologia TURBISCAN na análise de emulsões leva a resultados mais rápidos, mais precisos e mais confiáveis em comparação aos métodos tradicionais.



ECONOMIZE TEMPO PARA MEDIR A ESTABILIDADE FÍSICA

FORMULAÇÃO: MEDIÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTIMATIVA DE PRAZO DE VALIDADE

O TURBISCAN tem sido amplamente utilizado para medir a estabilidade física de formulações e sistemas coloidais. Esta tecnologia ajuda o formulador a economizar tempo, classificar e quantificar com precisão a estabilidade das amostras em diferentes ensaios ou lotes. Aplica-se a amostras nativas, mesmo em formulações altamente concentradas. Além de economizar tempo, o TURBISCAN também proporciona velocidade e métricas de desestabilização, bem como análises robustas para fazer previsões de prazo de validade. A tecnologia TURBISCAN atende perfeitamente às recomendações da ISO/TR 13097:2013 e é ideal quando se trata de medir a estabilidade com rapidez e precisão. Pare de suposições e tome decisões com base em fatos!



O QUE PODE SER MEDIDO TAMBÉM PODE SER MELHORADO

MAPEAMENTO DE ESTABILIDADE: EMULSÕES E SUSPENSÕES

A medição da estabilidade de emulsões e formulações é tradicionalmente feita por meio de observações visuais. Além de ser longa e cansativa, a inspeção visual da desestabilização da emulsão geralmente termina com uma resposta de aprovação/reprovação. Isso é inadequado para ajustar precisamente a concentração ideal de surfactantes ou estabilizantes a serem adicionados para atingir o prazo de validade desejado. O TURBISCAN é uma grande ajuda nesse sentido; não só economiza muito tempo para detectar a desestabilização, mas também fornece um valor baseado na instabilidade e classifica diferentes formulações em função do seu prazo de validade. Portanto, produz dados objetivos e reproduzíveis para criar um produto melhor, mais ecológico e mais seguro.

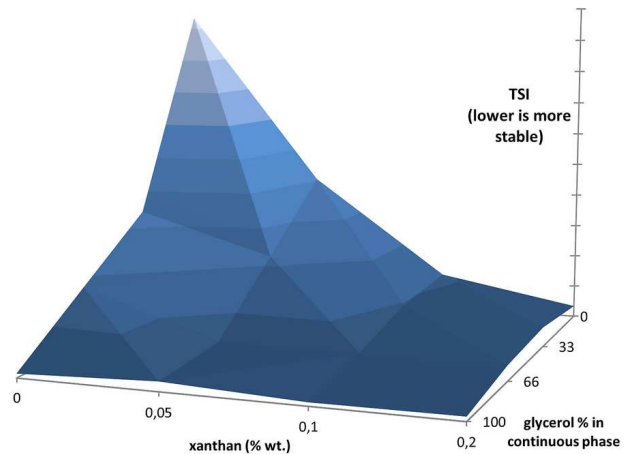


Imagem de exemplo de polímeros superabsorventes (SAP)

PRODUTOS ESTÁVEIS PARA SUSPENSÕES FARMACÊUTICAS MAIS SEGURAS E EFICIENTES

VACINAS E DISPERSÕES PARENTERAIS

Os testes de estabilidade e de prazo de validade são essenciais para produtos farmacêuticos e medicamentos. A desestabilização ou as instabilidades em vacinas, dispersões parenterais ou produtos farmacêuticos podem ter um impacto importante na eficácia do produto e, em alguns casos, na segurança do paciente. Embora muitas técnicas estejam disponíveis, o TURBISCAN oferece medições in situ, sem diluição e não destrutivas para detectar desestabilização e economizar tempo. Ele fornece uma medição de estabilidade clara, precisa e



PASTAS HOMOGÊNEAS PARA MAIOR
DESEMPENHO DA BATERIA

MELHORA DA EFICIÊNCIA DA BATERIA

Existe uma demanda exponencial por armazenamento de energia e baterias, seja para cobrir as nossas necessidades de mobilidade e comunicação, ou para se adequar aos desafios ambientais. As baterias de íons de lítio são a tecnologia mais utilizada e uma das principais etapas no desenvolvimento e fabricação delas é a formulação da pasta (utilizada nos eletrodos), garantindo a qualidade final da bateria. Esta pasta é, em geral, altamente concentrada e escura (devido a uma alta concentração de negro de carvão) e o uso de técnicas convencionais de espalhamento de luz para avaliação é desafiador ou requer uma quantidade significativa de diluição. O TURBISCAN tem sido utilizado com êxito para monitorar a estabilidade dessas pastas e ajuda o formulador a otimizar a formulação, testar a produção e identificar novas matérias-primas.



Para encontrar a melhor solução para a sua demanda de caracterização de partículas, visite o nosso banco de dados de aplicações





SOFTWARE ROBUSTO, RESULTADOS ROBUSTOS

TOWERSOFT PARA O TURBISCAN TOWER

A aquisição, interpretação e exportação de dados são feitas com TURBISOFT, o software dedicado e intuitivo para a linha TURBISCAN. TURBISOFT foi desenvolvido e é continuamente otimizado para análises de dados mais intuitivas e simples, economizando tempo e ajudando os usuários a obter os resultados que precisam com apenas alguns cliques.



- | Navegação intuitiva e simples
- | Comparação de estabilidade rápida e robusta graças ao algoritmo TSI
- | Cálculo avançado para análise profunda de dados: taxa de migração, evolução do tamanho médio das partículas, separação de fases e muito mais
- | Mantenha-se atualizado: licença gratuita – atualizações de software gratuitas
- | Precisa usar vários computadores? Este software multiusuário oferece cobertura
- | Exportação de dados tão fácil quanto copiar e colar
- | Gravação de vídeo de desestabilização de amostras para até 6 amostras
- | Procedimento de verificação de calibração totalmente guiado
- | Suporte multilíngue: Inglês, espanhol, francês, chinês, japonês, alemão e muito mais

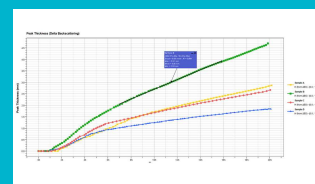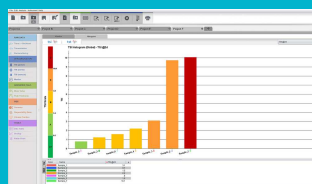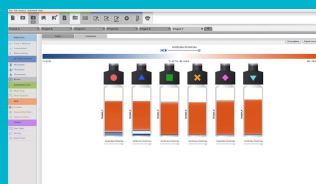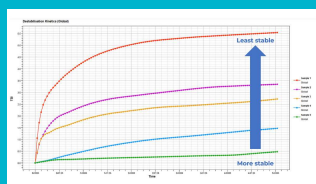

ANALISADOR DE ESTABILIDADE MULTIAMOSTRAS TURBISCAN TOWER

ACESSÓRIOS E OPÇÕES

Várias opções estão disponíveis para amostrar e testar a estabilidade de seus produtos. Desde frascos de vidro padrão descartáveis de 20 ml até pequenos volumes (até 2 ml) e para atender às suas necessidades específicas (tipo seringa, amostra de viscosidade muito alta...). Nós cuidamos disso!



Frascos padrão (20 ml)

Os frascos de vidro cilíndricos têm um volume recomendado de aproximadamente 20 ml. São descartáveis para evitar contaminação química ou bacteriana e diminuir os custos de mão de obra para lavagem e secagem. Os frascos são fechados graças a uma tampa e uma vedação descartável de PTFE para evitar evaporação em caso de temperatura elevada. Estes frascos destinam-se a reproduzir o seu teste de

estabilidade visual.



Volume pequeno (4 ml)

Volume de amostra pequeno? Sem problemas. Estão disponíveis frascos de volume pequeno e o adaptador específico. A medição pode ser feita com apenas 2 ml. Outra boa notícia: a amostra pode ser totalmente recuperada e a medição do TURBISCAN é sem contato/não destrutiva.



Adaptadores On-Demand (para seringas, frascos pressurizados)

Você tem requisitos especiais – e nós temos as soluções! Nossa equipe de desenvolvimento adora desafios, por isso podemos oferecer adaptadores sob demanda para o seu trabalho em amostras muito específicas (seringas, frascos pressurizados etc.). Perfeitos para estudar a estabilidade em condições específicas (pressão) ou para controle de qualidade.




Células de fundo aberto - Para amostras viscosas e frágeis

Existem amostras que são difíceis de transferir ou muito frágeis para serem despejadas – o conjunto de frascos de retirada ajuda a contornar este problema. A base aberta (que é fechada manualmente com uma tampa) permite que uma amostra pegajosa ou espuma seja facilmente removida com os frascos de retirada.



Padrões de calibração

Cada TURBISCAN vem com um conjunto de padrões para verificar a calibração do instrumento. O software TURBISCAN, TURBISOFT, orienta você passo a passo e, uma vez finalizado o procedimento, o software emite um sinal de "OK". O teste e os resultados são salvos e o procedimento de verificação do instrumento pode ser rastreado.

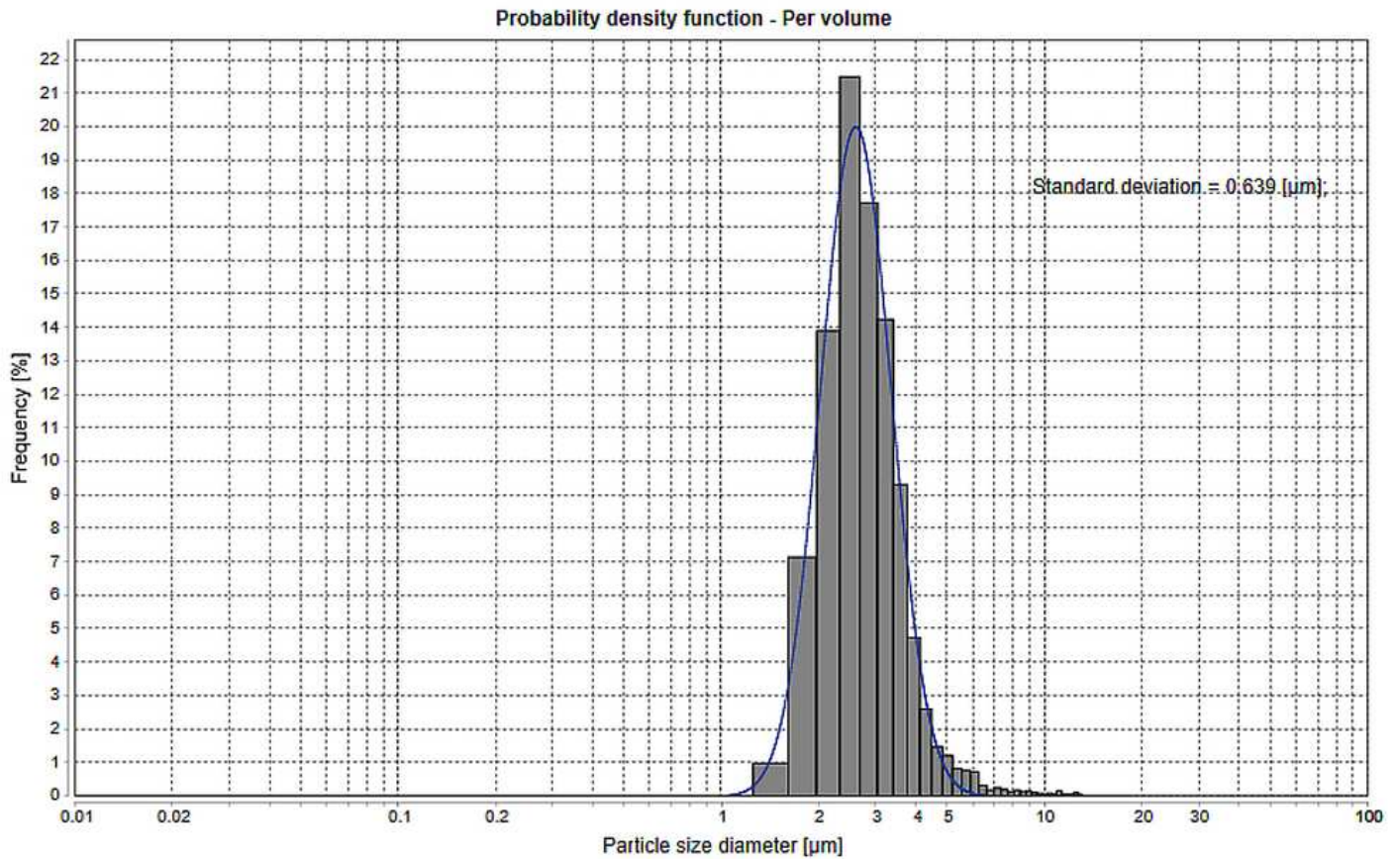

Distribuição de Tamanho de Partículas

O software TURBISIZE pode medir a distribuição de tamanho de partículas (ISO13317) e a distribuição da velocidade de migração para quaisquer dados obtidos com um TURBISCAN, sem necessidade de diluir, preparar ou modificar a amostra.

TURBISCAN TOWER

DADOS TÉCNICOS

Automatic sample recognition (bar-code)	Sim
Certificado CE	Sim
Dimensões	38 x 45 x 90 cm
Normas	ISO/TR 13097:2013, ISO/TR 18811:2018, ISO/TS 22107:2021, ISO/TS 21357:2022
Measured size range	10 nm - 1 mm
Wavelength	880 nm
Princípio de Medição	Static Multiple Light Scattering (SMLS)
Particle size distribution	Yes (additional software required)
Number of Samples	1 - 6
Reproducibility / Repeatability on latex standards	+/- 0.05% / 0.05%
Concentração da amostra	0.0001 - 95% v/v
Volume da amostra	2 - 20 mL
Scan step resolution	20 µm
Software	TurbiSoft Tower
Faixa de Temperatura	4 - 80°C
Peso	51 kg

www.microtrac.com/turbiscan-tower