


Определение распределения частиц по размерам и агломератов

Образцы: Стеклошарики и их спеченная форма


Определение формы с помощью динамического анализа изображений, **ожидается сможет подтвердить результаты** измерения частиц по размерам с помощью лазерной дифракции/светорассеяния, и доказать, что крупные частицы **“агломераты”** образовались в результате спекания.

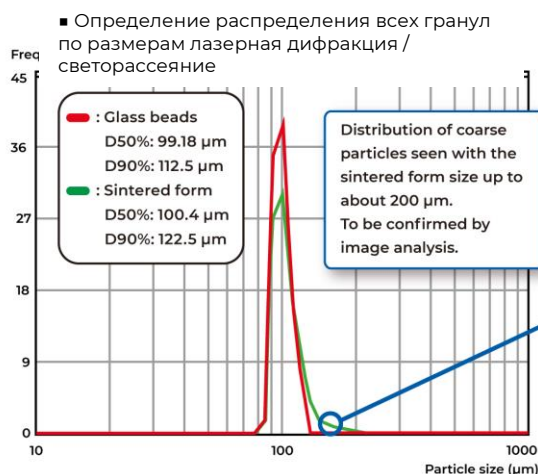

■ Анализ формы/ определение агломератов и индивидуальных частиц методом динамического анализа изображений




■ Диаграмма светорассеяния после спекания стеклошариков (анализ изображения)

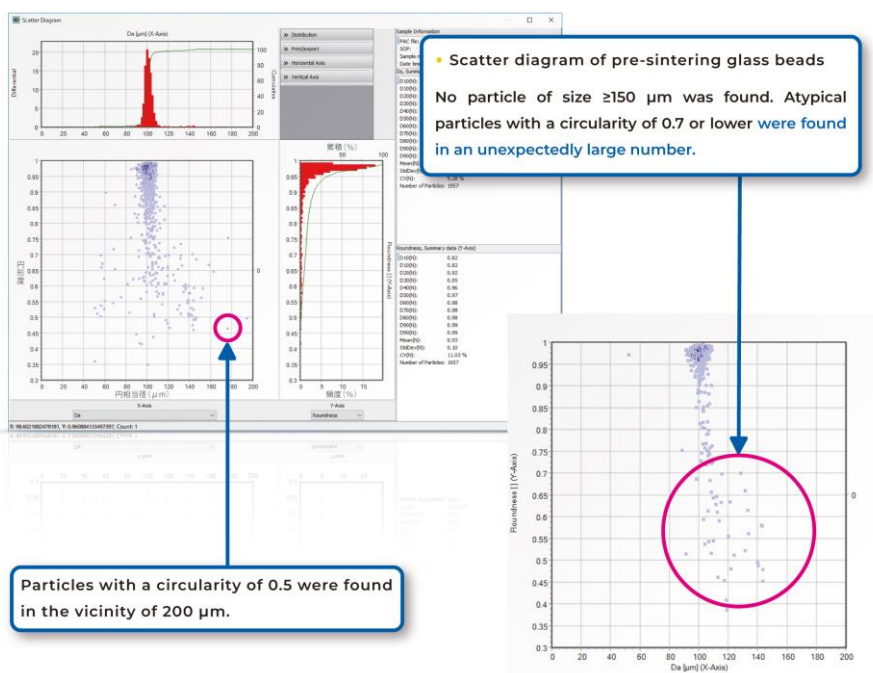

Прибор

«Система измерения распределения частиц по размерам и форме Microtrac MRB Sync»
Диапазон измерения: 0.02–2000 мкм
Распределение частиц по размерам:
Лазерная дифракция /Светорассеяние
Анализ формы: Динамический анализ изображений

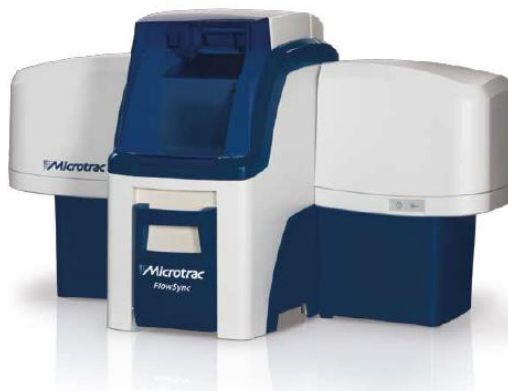

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

www.microtrac.com