


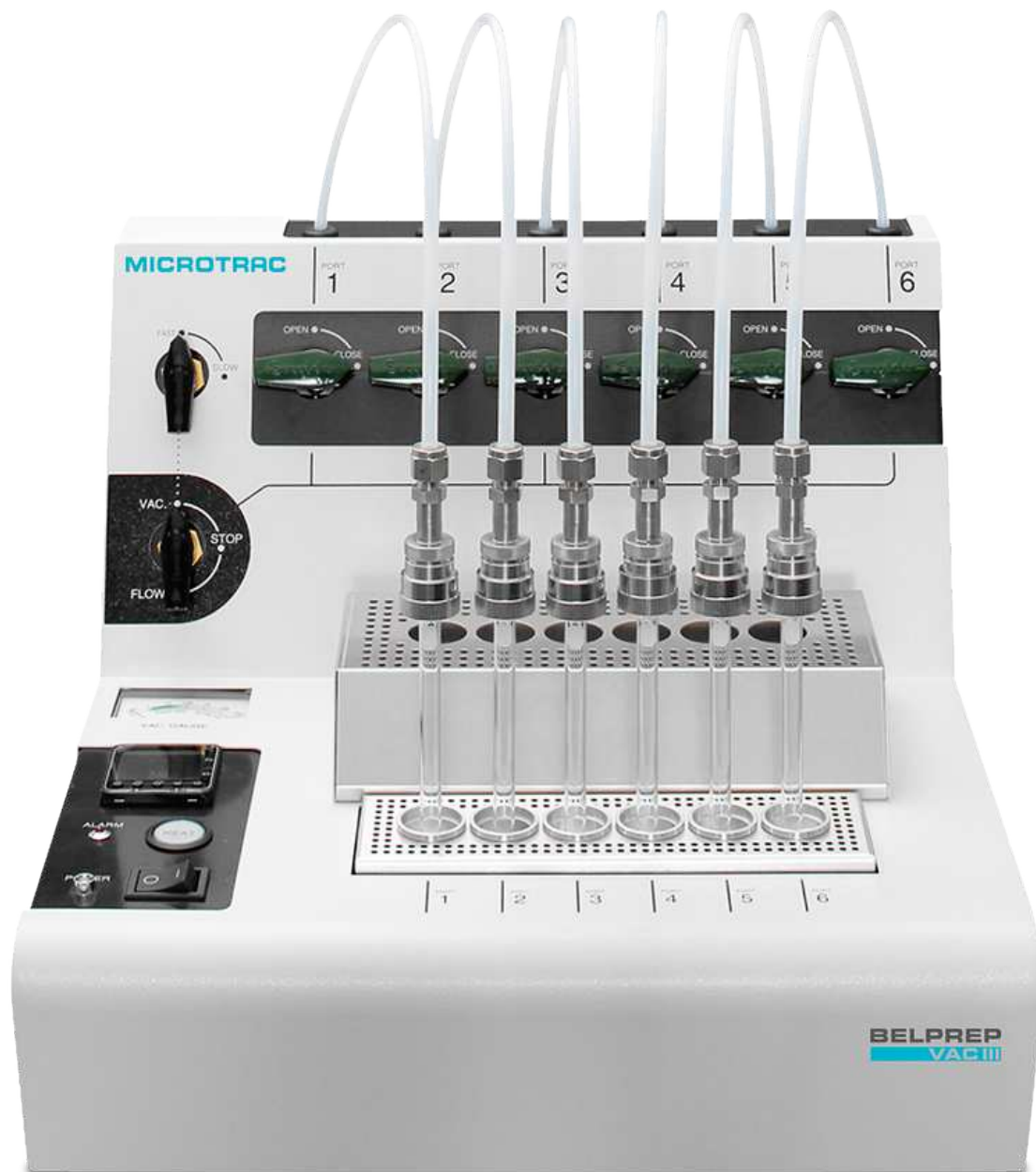

真空除气器

BELPREP VAC


BELPREP VAC 是带有流动脱气选项的真空脱气机。该仪器针对样品的加热预处理进行了优化，以便随后在真空或惰性气流中进行表面积和孔径分析。使用这种真空脱气机进行气体吸附的样品制备特别有效和快速，因为它可以与测量同时进行。**BELPREP VAC** 真空脱气机有两种型号：带有 3 个样品端口的 **BELPREP VAC II** 和带有 6 个样品端口的 **BELPREP VAC III**。

BELPREP VAC II



真空/热力脱气	是
流动/加热脱气	选择
预处理端口	3
最高温度	430°C
温度精度	±5°C
可编程温度控制功能	-
自动吹扫气体停止功能	是
自动真空抽气速度切换功能（防止样品散失）	是
设备尺寸（宽x高x深）	321 x 158 x 363 mm
重量	15 kg
实用性	气体：N2：0.1 Mpa(G) 接头：1/8" 世伟洛克连接 电源： AC 100-120 V或AC 200-240 V，530 VA（不含真空泵），50/60 Hz
通过CE认证	是

BELPREP VAC III

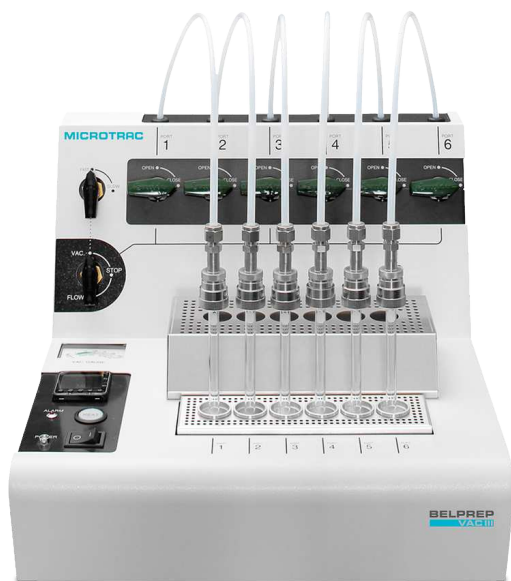

真空/热力脱气	是
流动/加热脱气	选择
预处理端口	6
最高温度	450°C
温度精度	±5°C
可编程温度控制功能	是
自动吹扫气体停止功能	-
自动真空抽气速度切换功能（防止样品散失）	-
设备尺寸（宽x高x深）	400 x 317 x 383 mm
重量	15 kg
实用性	气体：N2：0.1 Mpa(G) 接头：1/8" Swagelok连接 电源： AC 100-120 V或AC 200-240 V，630W（不含真空泵），50/60 Hz
通过CE认证	是

www.microtrac-mrb.cn/belprep-vac