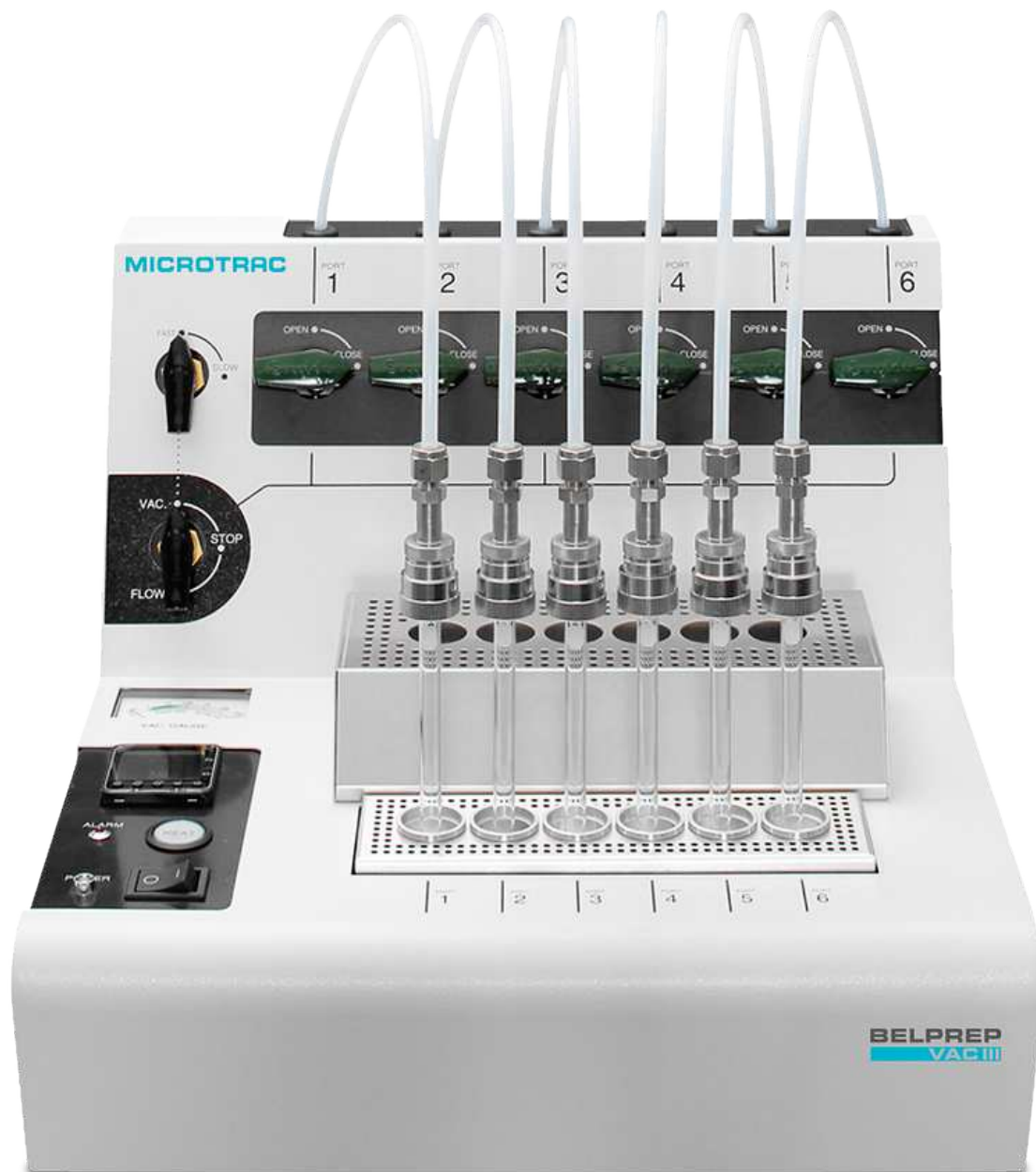




ODGAZOWYWACZ PRÓŻNIOWY
BELPREP VAC

BELPREP VAC to odgazowywacz próżniowy z opcją odgazowania przepływowego. Aparat jest zoptymalizowany do wstępnego podgrzewania próbek w celu późniejszej analizy powierzchni i wielkości porów w próżni lub w przepływie gazu obojętnego. Przygotowanie próbki do sorpcji gazu za pomocą tego odgazowywacza próżniowego jest szczególnie wydajne i szybkie, ponieważ można je przeprowadzić jednocześnie z samym pomiarem. Odgazowywacz próżniowy BELPREP VAC jest dostępny w dwóch modelach: BELPREP VAC II z 3 portami pomiarowymi i BELPREP VAC III z 6 portami pomiarowymi.

BELPREP VAC II**Odgazowanie próżniowe/termiczne**

Tak

**Odgazowywanie przepływowe/
termiczne**

opcja

Porty do obróbki wstępnej

3

Maksymalna temperatura

430°C

Dokładność temperatury

±5°C

**Programowalna funkcja kontroli
temperatury**

-

**Funkcja automatycznego zatrzymania
gazu przepływowego**

Tak

**Funkcja automatycznego przełączania
prędkości pompowania próżniowego
(zapobieganie dyspersji próbki)**

Tak

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

321 x 158 x 363 mm

Waga

15 kg

UżytkowanieGaz: N₂: 0,1 MPa(G)

Złącze: złącze Swagelok 1/8"

Zasilanie:

AC 100-120 V lub AC 200-240 V, 530 VA (bez pompy
próżniowej), 50/60 Hz**Certyfikat CE**

Tak

BELPREP VAC III



Odgazowanie próżniowe/termiczne

Tak

**Odgazowywanie przepływowe/
termiczne**

opcja

Porty do obróbki wstępnej

6

Maksymalna temperatura

450°C

Dokładność temperatury

±5°C

**Programowalna funkcja kontroli
temperatury**

Tak

**Funkcja automatycznego zatrzymania
gazu przepływowego**

-

**Funkcja automatycznego przełączania
prędkości pompowania próżniowego
(zapobieganie dyspersji próbki)**

-

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

400 x 317 x 383 mm

Waga

15 kg

Użytkowanie

Gaz: N₂: 0,1 MPa(G)

Złącze: złącze Swagelok 1/8"

Zasilanie:

AC 100-120 V lub AC 200-240 V, 630W (bez pompy próżniowej),
50/60 Hz

Certyfikat CE

Tak

www.microtrac.com/belprep-vac