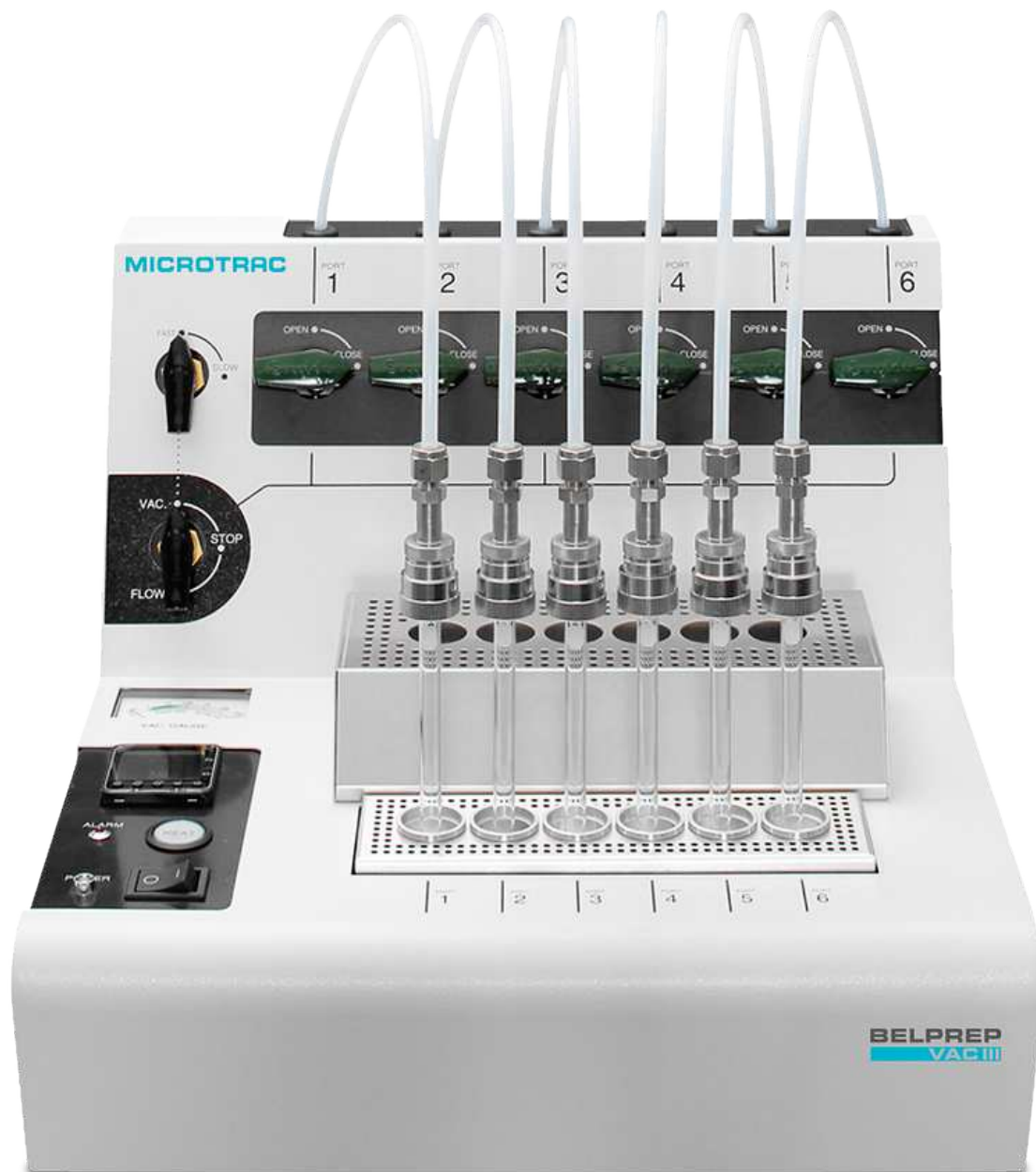




PRÍSTROJ NA PREDPRÍPRAVU

BELPREP VAC

BELPREP VAC je vákuový odplyňovač s možnosťou prietokového odplyňovania. Prístroj je optimalizovaný na tepelnú predúpravu vzoriek na následnú analýzu plochy povrchu a veľkosti pórov vo vákuu alebo v prietoku inertného plynu.

Príprava vzoriek na sorpciu plynu pomocou tohto vákuového odplyňovača je mimoriadne efektívna a rýchla, pretože sa môže vykonávať súčasne so samotným meraním.

Vákuový odplyňovač BELPREP VAC je k dispozícii v dvoch modeloch:
BELPREP VAC II s 3 otvormi na vzorky a BELPREP VAC III so 6 otvormi na vzorky.

BELPREP VAC II



Odplyňování vakua/tepla

áno

Odplynenie toku/tepla

možnosť

Predupravovacie porty

3

Maximálna teplota

430°C

Presnosť teploty

±5°C

Programovateľná funkcia regulácie teploty

-

Funkcia automatického zastavenia preplachovacieho plynu

áno

Funkcia automatického prepínania rýchlosti vákuového pumpovania (zabránenie rozptylu vzorky)

áno

Rozmery (Š x V x H)

321 x 158 x 363 mm

Hmotnosť

15 kg

Úžitkové vybavenie

Plyn: N₂: 0,1 Mpa(G)

Spojka: 1/8" Swagelok prípojka

Napájanie:

AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 530 VA (bez vakuového čerpadla), 50/60 Hz

Certifikát CE

áno

BELPREP VAC III



Odplyňování vakua/tepla

áno

Odplýnenie toku/tepla

možnosť

Predupravovacie porty

6

Maximálna teplota

450°C

Presnosť teploty

±5°C

Programovateľná funkcia regulácie teploty

áno

Funkcia automatického zastavenia preplachovacieho plynu

-

Funkcia automatického prepínania rýchlosti vákuového pumpovania (zabránenie rozptylu vzorky)

-

Rozmery (Š x V x H)

400 x 317 x 383 mm

Hmotnosť

15 kg

Úžitkové vybavenie

Plyn: N₂: 0,1 Mpa(G)

Spojka: 1/8" Swagelok prípojka

Napájanie:

AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 630 W (bez vákuovej pumpy), 50 / 60 Hz

Certifikát CE

áno

www.microtrac.com/belprep-vac