


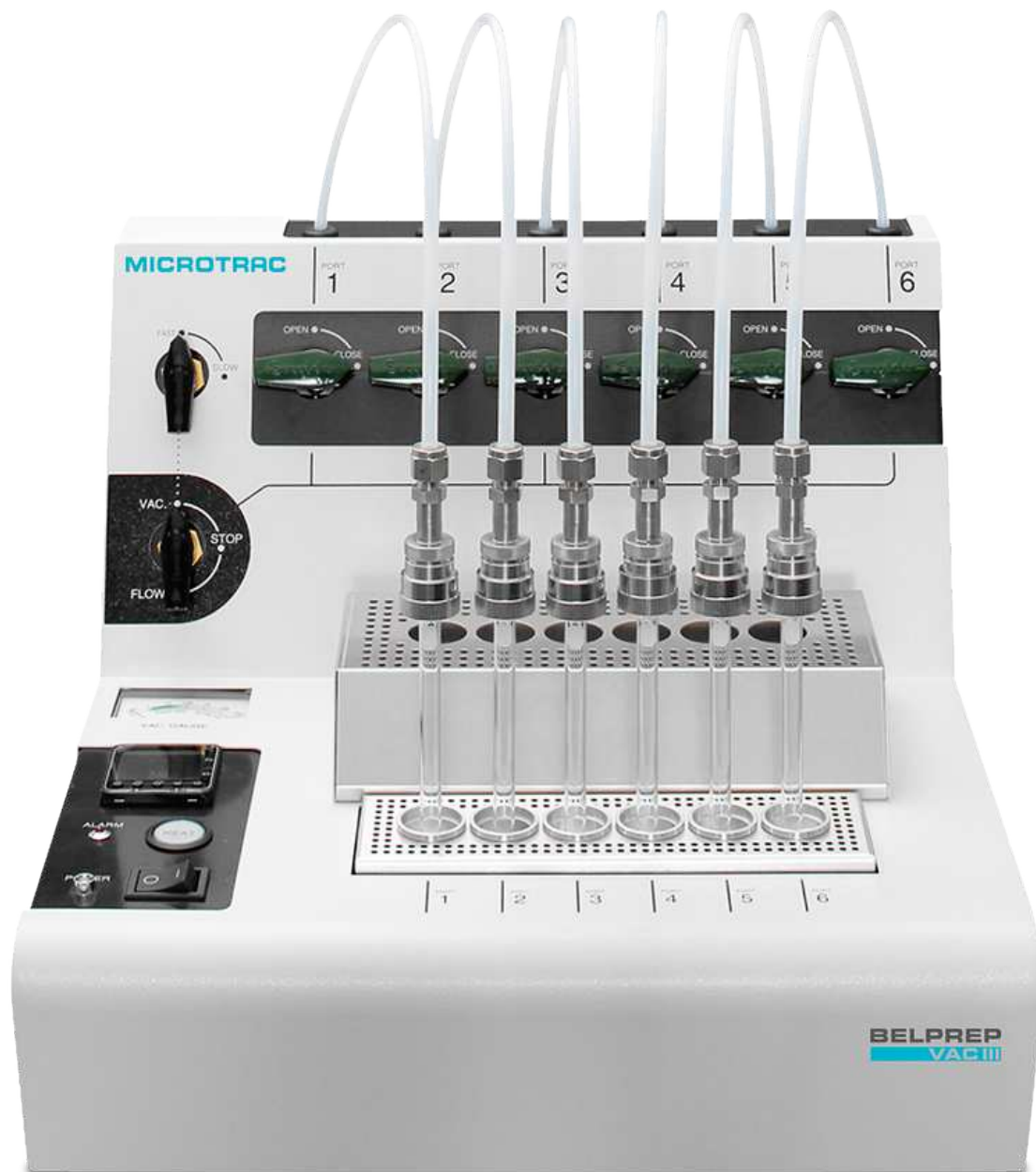

DESGASEIFICADOR A VÁCUO
BELPREP VAC

o BELPREP VAC é um degaseificador a vácuo com opção de degasagem por fluxo. O instrumento é otimizado para o pré-tratamento de amostras por aquecimento para subsequente análise de tamanho de área superficial e poros em vácuo ou corrente de gás inerte.

O preparo de amostras para sorção de gás com esse degaseificador a vácuo é particularmente eficiente e rápido porque pode ser operado simultaneamente com a própria medição.

Há dois modelos de degaseificador a vácuo BELPREP VAC:

o BELPREP VAC II, com 3 acessos de amostra, e o BELPREP VAC III, com 6 acessos de amostra.

BELPREP VAC II



Desgaseificação a vácuo/calor

Sim

Desgaseificação de fluxo/calor

option

Acessos ao pré-tratamento

3

Temperatura máxima

430°C

Precisão de temperatura

±5°C

Função programável de controle de temperatura

-

Função automática de desativação de gás purgador

Sim

Função automática de comutação de velocidade de bombeamento (impedimento de dispersão de amostra)

Sim

Dimensões (L x A x P)

321 x 158 x 363 mm

Peso

15 kg

Utilidade

Gás: N2: 0,1 Mpa(G)

Junta: 1/8" Conexão Swagelok


Corrente:

AC 100-120 V ou AC 200-240 V, 530 VA (sem bomba de vácuo),
50 / 60 Hz

Certificado CE

Sim

BELPREP VAC III

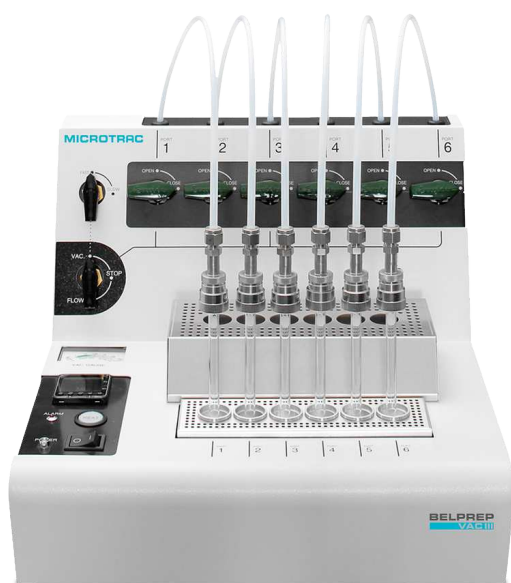

Desgaseificação a vácuo/calor

Sim

Desgaseificação de fluxo/calor

option

Acessos ao pré-tratamento

6

Temperatura máxima

450°C

Precisão de temperatura

±5°C

Função programável de controle de temperatura

Sim

Função automática de desativação de gás purgador

-

Função automática de comutação de velocidade de bombeamento (impedimento de dispersão de amostra)

-

Dimensões (L x A x P)

400 x 317 x 383 mm

Peso

15 kg

Utilidade

Gas: N2: 0.1 Mpa(G)

Joint: 1/8" Swagelok connection

Power:

AC 100-120 V or AC 200-240 V, 630W (without vacuum pump),
50 / 60 Hz

Certificado CE

Sim

www.microtrac.com/belprep-vac