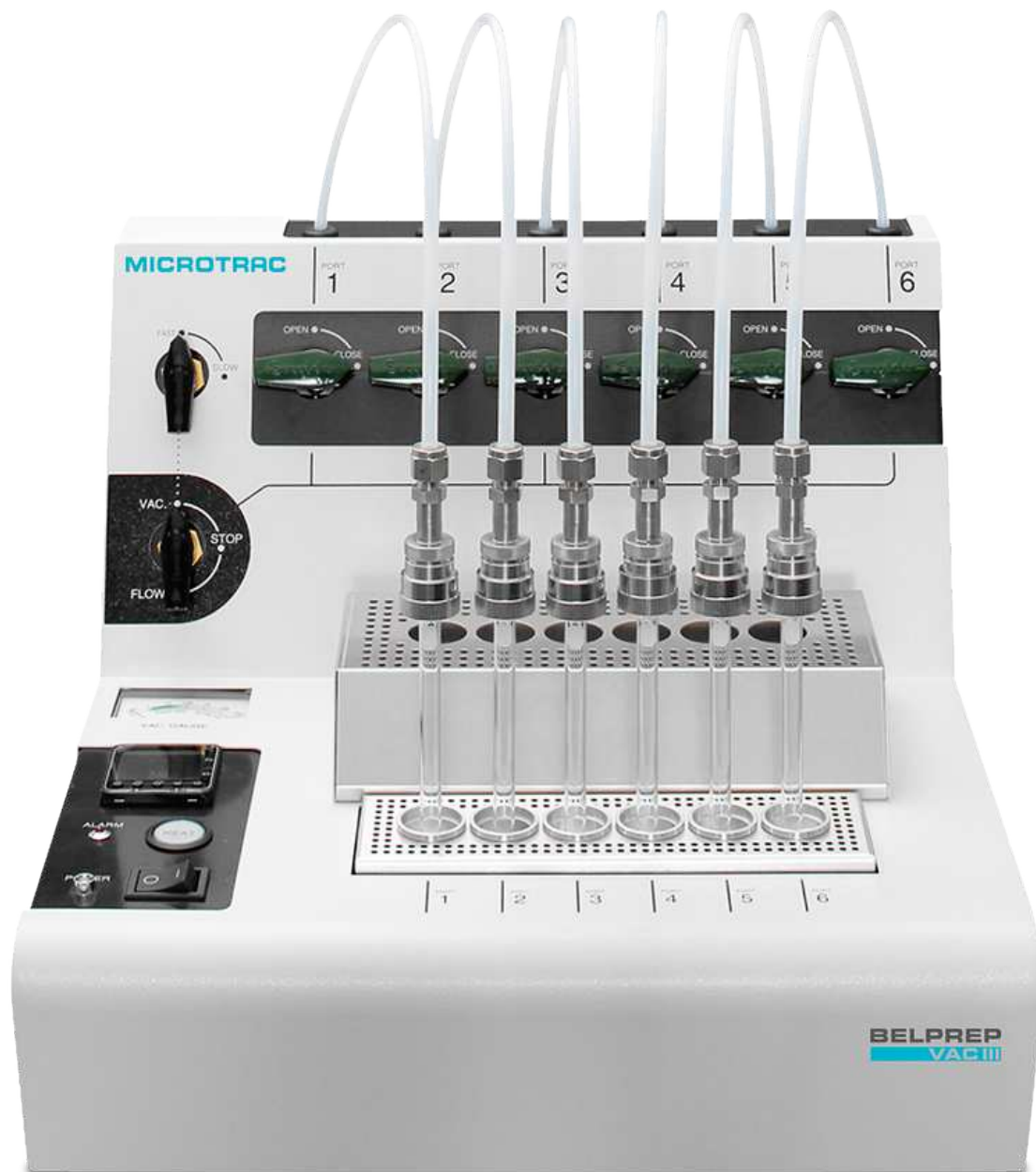




ELŐKEZELŐ KÉSZÜLÉK

BELPREP VAC

BELPREP VAC II a gázmentesítést melegítéssel végző mintaelőkészítő egység, mely a mintákat vákuum vagy inert gázáram alatti mérésre készíti elő. Az előkészítés különösen hatékony és gyors, mivel az magával a méréssel egyidejűleg végezhető.

BELPREP VAC II készülék 3 mintát képes kezelni.

BELPREP VAC III készülék 6 mintát képes kezelni.

BELPREP VAC II



Vákuumos/melegítéssel gázmentesítés

igen

Áramlásos/melegítéssel gázmentesítés

opció

Előkezelési portok száma

3

Max. hőmérséklet

430°C

Hőmérséklet helyessége

±5°C

**Programozható
hőmérséklet szabályozás**

-

Öblítőgáz automatizált leállítása

igen

**Vákuum szívási sebesség automatizált
állítása (minta diszpergálása
megakadályozásához)**

igen

Méret (szél x mag x mély)

321 x 158 x 363 mm

Súly

15 kg

Gázigény

gáz:

N₂: 0.1 Mpa (G)

csatlakozás:

1/8" Swagelok

elektromos hálózat:

AC 100-120 V vagy AC 200-240 V, 530 VA (vákuumszivattyú
nélkül), 50/60 Hz

CE jelzés

igen

BELPREP VAC III



Vákuumos/melegítéssel gázmentesítés

igen

Áramlásos/melegítéssel gázmentesítés

opció

Előkezelési portok száma

6

Max. hőmérséklet

450°C

Hőmérséklet helyessége

±5°C

**Programozható
hőmérséklet szabályozás**

igen

Öblítőgáz automatizált leállítása

-

**Vákuum szívási sebesség automatizált
állítása (minta diszpergálása
megakadályozásához)**

-

Méret (szél x mag x mély)

400 x 317 x 383 mm

Súly

15 kg

Gázigény

gáz: N₂: 0.1 Mpa(G)
csatlakozás: 1/8" Swagelok
elektromos hálózat:
AC 100-120 V vagy AC 200-240 V, 630W (vákuumszivattyú
nélkül), 50/60 Hz

CE jelzés

igen

www.microtrac.com/belprep-vac